

PRVA POMOĆ



ZA SIGURNA
RADNA MESTA

Sredstvo za ispiranje očiju
Flasteri
Stanice za prvu pomoć

plum

Optimalna sigurnost. Sigurna prva pomoć.

Uz pomoć rešenja Plum prve pomoći moguće je minimizirati broj nezgoda na radnom mestu, te njihove loše posledice, za efikasan rad vaših zaposlenih i kompanije.



Manje –veće nezgode se svaki dan događaju. U tim situacijama je važno da prva pomoć bude brza i profesionalna. Uz pomoć velikog izbora naših proizvoda omogućujemo vam da lako možete postupiti u slučaju manjih posekotina, povreda, oštećenja očiju-i sve to na higijenski, siguran način-zajedno sa vašim saradnicima -. Naše stanice za prvu pomoć garantiraju da će pomoć uvek biti pri ruci i u slučaju manjih ozljeda.

REŠENJA U SKLADU SA POTREBAMA VAŠEG RADNOG MESTA

Nudimo široki izbor proizvoda za prvu pomoć, kao što su sredstva za ispiranje očiju, flasteri, maramice za čišćenje rana itd... Vi jednostavno možete izabrati proizvode koji su Vam potrebni na Vašem radnom mestu. Radite u kancelariji? U laboratoriju gde se koriste i hemikalije? U fabrici za preradu hrane? Možda u radionici za popravljanje auta? Plum proizvodi vam mogu biti korisni u bilo kojem poslovnom okruženju.

” SKORO JE POTPUNO
IZGUBIO VID ZBOG
LABAVOG CREVA...

Hanstholm Fiskemelsfabrik ima razvijenu proizvodnu jedinicu, ali pre nekoliko godina je fabrika samo osnovno sredstvo za ispiranje očiju imala na raspolaganju. Zbog toga je jedan zaposleni platio visoku cenu: kada je jedno crevo postalo labavo i lužina ušla u oba dva oka, skoro je potpuno izgubio vid. Nakon nezgode fabrika je počela obraćati više pažnje na prikladno pružanje prve pomoći. »Da smo u to vreme imali sredstvo za ispiranje očiju, kao što je pH Neutral DUO, i ta nezgoda bi bila manje tragična. Danas nam je već uvek pri ruci« rekao je rukovodilac nabavke u kompaniji, Ronni Jorgensen.



Zeleno Plum sredstvo za ispiranje očiju pomaže pri uklanjanju prašine i stranih tela iz očiju.

pH Neutral u plavoj bočici odmah pruža pomoć čak i u slučaju povreda oka uzrokovanih od strane kiselina i lužina.

Lako je rukovati sa bočicama koje osiguravaju stalno i nežno ispiranje očiju.

Pravilno korištenje sredstva za ispiranje očiju možete pogledati na piktogramu.

Čašica za ispiranje očiju, napravljena od mekane plastike je izrađena na način da odgovara obliku oka. Blago je stisnite pre nego stavite na oči. Na taj će način čep pomoći da vam oči ostanu otvorene tokom celog vremena ispiranja, omogućujući maksimalno čišćenje.

Lako i brzo se otvara. Jedan jedini potez i sredstvo je spremno za korišćenje.

Ekonomsko pakovanje, rok trajanja može biti čak i 3 godina. Datum isteka trajanja je jasno odštampano na početku ambalaže.

Zahvaljujući ergonomskom sredstvu za ispiranje očiju DUO, istovremeno se može izvršiti ispiranje oba dva oka. Čašica za ispiranje pomaže da oči ostanu otvorene tokom celog vremena ispiranja.



Na sve smo mislili.

Zeleno Plum sredstvo za ispiranje očiju nudi brzo rešenje za nezgode uzrokovane mehaničkom prljavštinom. pH Neutral neutrališe materijale od kiseline i lužina.

IMATE SAMO DVA OKA – PAZITE NA NJIH!

Oči su nam među najvažnijim čulima. Dakle pazite na njih! Nezgode se uvek dešavaju. Ne možemo ih uvek sprečiti, ali se možemo pripremiti na hitnu i prvu pomoć. Ukoliko se povreda očiju već dogodila, svaka sekunda je važna! I najmanje zakašnjenje može uticati na to da li ćete izgubiti vid ili ne. Stoga je vrlo važan brz pristup sredstvu za ispiranje očiju i prvu pomoć.

JEDINSTVENA REŠENJA ZA ISPIRANJE OČIJU

Zahvaljujući našem širokom izboru proizvoda jednostavno možete izabrati rešenje koje je najoptimalnije za vašu kompaniju. Izaberite stanice koje se mogu pričvrstiti na zid, izravno na vašem radnom mestu. Ili manja sredstva, laka za nošenje, u vozila, kutiju sa alatima ili kutijicu za prvu pomoć – možete držati sredstvo za ispiranje očiju i u specijalno izrađenoj torbici oko struka.

Bocice za ispiranje oči imaju CE sertifikat.



plum

Izbegnimo povrede očiju!

Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć uklanja prljavštine i prašinu iz očiju, dok sredstvo pH Neutral neutrališe materijale od kiseline i lužine.

Naši proizvodi su razvijeni uz pomoć kvalifikovanih stručnjaka za oči. To znači da smo tokom izrade naših sredstva za ispiranje očiju mislili i na najsitnije detalje. Piktogrami vam pomažu u pravilnom korištenju. Čep omogućuje da oko celo vreme ostane otvoreno tokom ispiranja. Tekućina na taj način dolazi u dodir sa okom na prikladnom mestu, jednako i u optimalnoj količini.



Plum sredstvo za ispiranje očiju je lako upotrebiti ako se dogodila nezgoda.



Okrenite čep u smeru strelice dok se ne otvori bočica.



Naslonite se malo, stisnite bočicu i započnite ispiranje.



Nakon toga se oko može isprati i ako se malo nagnete.

PLAN PRVE POMOĆI U SLUČAJU POVREDE OČIJU

1	2	3	4
Definirajmo vrstu povrede	Izaberimo odgovarajuće sredstvo za ispiranje očiju	Nastavimo sa ispiranjem	Isperimo oko prema uputstvima
Strani materijali prašina, čađ, komadići drveta i metala	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Isperimo oko dok se prljavština potpuno ne ukloni.
Kiselina	pH Neutral	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Isperimo oko pH Neutral sredstvom odprilike 2 minute, te nastavimo sa Plum sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć (fiziološki rastvor soli), dok stignemo kod lekara.
Lužina	pH Neutral	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Isperimo oko pH Neutral sredstvom odprilike 2 minute, te nastavimo sa Plum sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć (fiziološki rastvor soli), dok stignemo kod lekara..
Ostale hemikalije	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	Isperimo oko dok stignemo kod lekara.

Uvek se uverimo da je mlaz tečnosti sredstva za ispiranje očiju jednak i ravnomeran kada dolazi u dodir sa očima. Ukoliko su povređena oba dva oka, koristimo sredstvo DUO.



Jedinstveno rešenje

Trenutno ne postoji rešenje slično Plum DUO sredstvu za ispiranje očiju. Od sada ne trebate birati koje oko da spasite!

SKORO 50% OZLJEDA OČIJU UTIČE NA OBA DVA OKA

Rezultati istraživanja su pokazali da skoro 50% povreda očiju nastala zbog hemikalija istovremeno utiče na oba dva oka. DUO sredstvo za ispiranje očiju vam pomaže da se pripremite na slične opasnosti.

ČEP OMOGUĆUJE OPTIMALNO ISPIRANJE

Vreme je vrlo važno ukoliko se radi o povredama uzrokovanim hemikalijama. Ozbiljnost povrede naravno zavisi o koncentraciji kiseline ili lužine, ali pored toga vrlo je važno i vremensko trajanje kontakta sa okom. Stoga optimalna prva pomoć mora što pre neutralisati štetne materijale.

DUO čep je izrađen na način da odgovara obliku oka te da omogućuje da ono ostane otvoreno tokom ispiranja – na taj način osiguravajući jednako ispiranje i prikladno vremensko trajanje ispiranja.

Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć se jedanput mogu upotrebiti. Samo se na taj način može osigurati da tečnost za ispiranje ostane sterilna.



Sredstvo za ispiranje očiju u slučaju mehaničkih povreda

Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć eliminiše neugodan osećaj, bol uzrokovan stranim materijalima i prljavštinom, te pomaže u sprečavanju posledica.

Svakakvi strani materijali lako mogu da dođu u kontakt sa okom. Prašina, prljavština iz vazduha ili boja sa dlanova... Veća je opasnost na radnim mestima gde komadići drveta i metala mogu doći u dodir sa okom, tokom korištenja uređaja i sredstva za rad.

Već i najmanja prljavština može biti izvanredno neugodna. Bez odgovarajuće nege i manje povrede mogu uzrokovati upalu oka, rožnjače ili šarenice. Ukoliko izvršite ispiranje očiju odmah nakon povrede, možete sprečiti upalu te da strani materijal ostane u oku.

Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć sadrži sterilni rastvor natrij-hlorida od 0,9%, te omogućuje jednako i nežno ispiranje očiju. U izboru naših proizvoda možete pronaći i najmanju bočicu, laku za rukovanje, koju uvek možete nositi sa sobom i veće izdanje, koje se može pričvrstiti na zid i koje pomaže da bi se odmah mogla pružiti pomoć u slučaju nezgoda na radnom mestu.



**200 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ**

Ova mala bočica, laka za rukovanje stane i u najmanji džep odela. Sredstvo za ispiranje očiju sadrži sterilni rastvor natrij-hlorida od 0,9%. Bočica se može držati u specijalnoj torbici oko struka, u kutiji za prvu pomoć ili za alate. Sa štitnikom od prašine.

Vreme ispiranja: otp. 2 minute
Transp.pakovanje: 10 x 200 ml
Broj artikla: 4691



**500 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ**

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnim rastvorom natrij-hlorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. Može se upotrebiti posebno, ali i za dopunu stanica. Sa štitnikom od prašine.

Vreme ispiranja: otp. 5 minuta
Transp.pakovanje: 12 x 500 ml
Broj artikla: 4604



**1000 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ**

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnim rastvorom natrij-hlorida od 0,9%. Zahvaljujući izdanju od 1000 ml, omogućuje duže vremensko trajanje ispiranja. Može se upotrebiti posebno, ili za dopunu stanica. Sa štitnikom od prašine.

Vreme ispiranja: otp. 10 minuta
Transp.pakovanje: 6 x 1000 ml
Broj artikla: 4707



**500 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ DUO**

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnim rastvorom natrij- hlorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. DUO izrada omogućuje istovremeno ispiranje oba dva oka. Može se upotrebiti posebno ili za dopunu stanica.

Vreme ispiranja: otp. 2 minute
Transp.pakovanje: 6 x 500 ml
Broj artikla: 4861



**1000 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ DUO**

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnim rastvorom natrij-hlorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. Zahvaljujući izdanju od 1000 ml, omogućuje duže vremensko trajanje ispiranja. DUO izrada omogućuje istovremeno ispiranje oba dva oka. Može se upotrebiti posebno ili za dopunu stanica.

Vreme ispiranja: otp. 5 minuta
Transp.pakovanje: 6 x 1000 ml
Broj artikla: 4800



**3 X 500 ML
PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE
OČIJU I PRVU POMOĆ**

Praktično izdanje sredstva za ispiranje očiju sa 3 komada bočica od 500 ml, koje sadrže sterilni rastvor natrij-hlorida od 0,9%. Kutija je laka za nošenje, možemo je poneti u autu dok stignemo kod lekara. Bočice se i posebno mogu upotrebiti ali i za dopunjavanje stanica za ispiranje očiju.

Vreme ispiranja: otp. 15 minuta
Transp.pakovanje: 4 x 3 x 500 ml
Broj artikla: 4620

Ispiranje očiju u slučaju povreda od hemikalija

pH Neutral neutrališe kiseline i lužine te ih eliminiše iz očiju tokom ispiranja. Dokazana efikasnost!

VAŽNE INFORMACIJE

U slučaju povreda očiju uzrokovana hidrogen fluoridom se ni sam pH Neutral, niti samo Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć se ne može koristiti. Oni mogu neutralisati i isprati hidrogen fluorid iz oka, ali ne mogu sprečiti jaku povredu tkiva, tako da je svakako potrebno obratiti se lekaru u slučaju sličnih očnih povreda.

PRAVILNA UPORABA PH NEUTRALA

pH Neutral sredstvo za ispiranje očiju osigurava ispiranje u roku 2 minute, u slučaju očnih povreda uzrokovanim hemikalijama sa kiselinom i lužinom. Upotrebite pH Neutral za neutralisanje kiseline ili lužine te za vraćanje prirodne pH vrednosti oka. Nakon toga nastavite sa ispiranjem uz pomoć Plum sredstva (sterilni rastvor od 0.9%), dok ne stignete kod lekara.

SVUDA IMA OPASNIH MATERIJALA

Ima radnih mesta i industrija gde su radnici izloženi opasnosti većoj od uobičajene, što se tiče povreda od hemikalija. Na primer, u raznim hemijskim fabrikama, u industriji za recikliranje, fabrikama cementa i na gradilištima ili na području petrohemijske, te u prehrambenoj i papirnoj industriji. Tokom spremanja i čišćenja se također često koriste materijali od jake kiseline i lužine. Nezgoda se uvek može dogoditi: dovoljno je jedno labavo crevo ili eksplodiran akumulator i nezgoda se dogodila. Upravo zbog toga, uvek držite pri ruci pH Neutral sredstvo za ispiranje očiju!

VEĆ NEKOLIKO SEKUNDI MOGU BITI PRESUDNE

Kiseline i lužine oštećuju tkivo i strukturu kože. Težina povrede zavisi od više faktora:

- Koncentracija hemikalije: materijali od jake kiseline i lužine mogu uzrokovati vanredne povrede.
- Temperatura: što je višja temperatura, to je jača povreda koju hemikalije mogu uzrokovati.
- Vremensko trajanje kontakta: što je duže hemikalija u dodiru sa kožom ili očima, to je ozbiljnija povreda.

U slučaju povreda očiju uzrokovanih hemikalijama vrlo je važno da ih što pre neutrališemo, te da postignemo vrednost od 7.4 pH, koja odgovara prirodnoj PH vrednosti oka. Čak i nekoliko sekundi mogu biti presudne: kiselina ili lužina se po mogućnosti treba neutralisati još pre nego što bi one dotakle rožnjaču. Tamo gde se može pojaviti opasnost povreda očiju, važno je da tečnost za ispiranje očiju bude:


- Lako dostupna
- SSpremna za brzu i laku upotrebu
- Efikasna

SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU MORA BITI EFIKASNO

pH Neutral je fosfatni rastvor od 4.9%, koji brzo i efikasno neutrališe materijale od kiseline i lužine. Hidrogen-fosfat pruža efikasnu pomoć protiv kiselina, dok dihidrogen-fosfat neutrališe lužine. Efikasnost pH Neutral sredstva za ispiranje očiju potvrđuju naučna istraživanja.

Testirali smo efikasnost pH Neutral-a protiv jakih kiselina i lužina te smo je usporedili sa osnovnim sredstvom za ispiranje očiju koje sadrži rastvor natrij-hlorida od 0.9%. Test je jasno pokazao da pH Neutral u kratkom vremenu može neutralisati većinu materijala od kiseline i lužine, te vratiti normalnu pH vrednost oka. Osnovno sredstvo za ispiranje očiju također može razvodniti hemikalije na taj način malo ublažavajući bol, ali u pH vrednosti može postići samo manje promene. (1. slika).

1-slika: Neutralisanje jakih kiselina i lužina

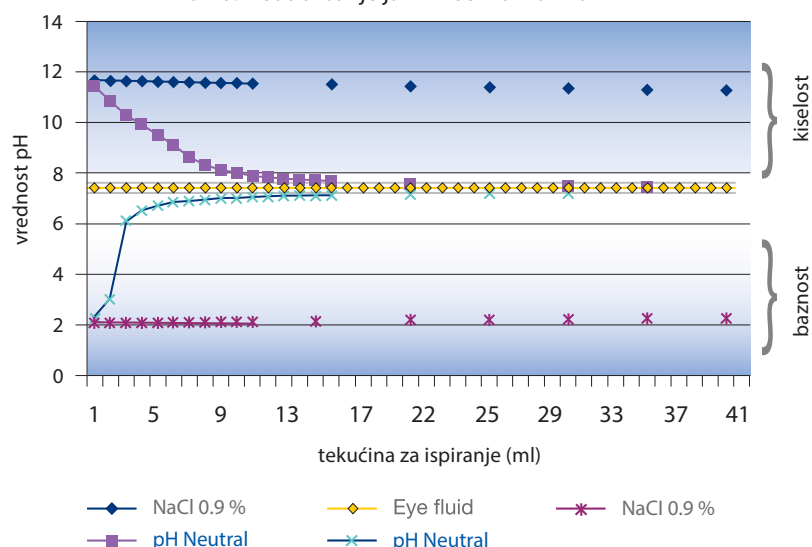

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.

All documentation is available on request.



**200 ML
PH NEUTRAL**

Ova mala bočica, laka za rukovanje stane i u najmanji džep odela. Sredstvo za ispiranje očiju sadrži sterilni fosfatni rastvor od 4.9% koji brzo neutrališe kisele i lužne hemikalije. Bočica se može držati u specijalno izrađenoj torbici oko struka, u kutiji za prvu pomoć ili u ladici za alate. Sa štitnikom od prašine.

Vreme ispiranja: otp. 2 min
Transp.pakovanje: 10 x 200 ml
Broj artikla: 4752



**500 ML
PH NEUTRAL DUO**

Sredstvo za ispiranje očiju sa 4.9% fosfata, koji brzo neutrališe kisele i lužne hemikalije. Zahvaljujući DUO izradi oba dva oka se istovremeno mogu čistiti, tako da je preporučeno za radna mesta gde postoji opasnost da se oba dva oka povrede.

Vreme ispiranja: otp. 2 min
Transp.pakovanje: 6 x 500 ml
Broj artikla: 4801



**1000 ML
PH NEUTRAL SREDSTVO
ZA ČIŠĆENJE OČIJU MLAZOM**

Sredstvo za čišćenje očiju od 4.9% sterilnog fosfata koji brzo neutrališe hemikalije od kiseline i lužine. Može se upotrebiti posebno na radnim stanicama, lako se može držati u kutiji sa alatima ili na zidu. Sa štitnikom od prašine.

Vreme ispiranja: otp. 2 min
Transp.pakovanje: 6 x 1000 ml
Broj artikla: 4746



**” PОВРЕДЕ ОČIJU
UZROKOVANE
HEMIKALIЈAMA
SE DOGAĐAJU
KADA NAJMANJE
RAČUNAMO...**

pH Neutral DUO je spasio vid radniku francuske kompanije SITA. Bave se reciklažom plastike – kao što su bočice sredstva za čišćenje. Nagrizajuće sredstvo je iz takve bočice došlo u kontakt sa očima radnika. Međutim, pH Neutral DUO je odmah uspeo neutralisati štetan materijal i to istovremeno u oba dva oka. Tako je zaposlenik već sledeći dan mogao nastaviti sa poslom, bez oštećenja vida.



Stanice za ispiranje očiju u slučaju mehaničkih povreda

Zidna stanica se lako može pregledati i odmah pruža pomoć u slučaju nezgoda

PLUM DUO BOX ZA ISPIRANJE OČIJU

Zidna stanica za ispiranje očiju, otporna na prašinu, od polistirena, 2 x 1000 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Prikladno za radna mesta gde postoji opasnost mehaničkih povreda očiju, prašine i prljavštine.

Vreme ispiranja:	otp. 10 min
Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	4816
Dimenzije:	357 x 252 x 116 mm

JEL JE I ZA VAS OZBILJNA STVAR PRUŽANJE PRVE POMOĆI?

Nezgode se neočekivano događaju – tada je već kasno u ormaru tražiti kutiju za prvu pomoć, ona je odmah potrebna!

Zahvaljujući stanicama, sredstva potrebna za pružanje prve pomoći lako postaju dostupna. Možete birati među otvorenim i zatvorenim stanicama po izradi. Zadnje su praktične uglavnom za radna okruženja gde ima puno prašine, zbog osiguravanja higijenskog održavanja za bočice.

Važno: izvan stanica uvek držimo pri ruci još par bočica da u slučaju nezgode možemo nastaviti sa ispiranjem, dok ne stignemo kod lekara.



PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU I PRVU POMOĆ U KUTIJI

200 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć u kutiji. Kutija od kartona štiti bočicu od prljavština, ali se lako otvara kada je potrebno. Prikladno za dopunu stanica za ispiranje očiju ili mobilna radna mesta (na primer vozila).

Vreme ispiranja:	otp. 2 min
Transp.pakovanje:	10
Broj artikla:	4695
Broj artikla zidne ručke:	955904
Dimenzije:	58 x 58 x 163 mm



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU U KUTIJI

500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju sa zidnom ručkom, u kutiji. Kutija od kartona štiti bočicu od prljavštine ali se lako otvara, ukoliko je potrebno. Prikladno za brza i jednostavna ispiranja na radnim mestima gde ima više prašine.

Vreme ispiranja:	otp. 5 min
Transp.pakovanje:	12
Broj artikla:	4609
Broj artikla za dopunu:	4605
Broj artikla zidne ručke:	955904
Dimenzije:	79 x 79 x 214 mm



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU DUO

Zidna stanica za ispiranje očiju sa 1000 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju. Vrlo prikladno za manje ili mobilne radne stanice gde istovremeno ispiranje oba dva oka može biti potrebno.

Vreme ispiranja:	otp. 5 min
Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	4802
Dimenzije:	375 x 180 x 95 mm



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU U KUTIJI

Zidna stanica za ispiranje očiju, otporna na prašinu od polistirena, sa 2 x 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Izvanredno prikladno na prljavim područjima gde ima prašine ili na mobilnim radnim stanicama.

Vreme ispiranja: otp. 10 minuta
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4650
Dimenzije: 280 x 230 x 110 mm

MOGUĆE UGRADITI I ZAJEDNO SA JEDINICOM ZA GREJANJE.

Broj artikla: 4649

LAKO SE PRIČVRŠĆUJE

Svaka se zidna stanica lako može pričvrstiti i sadrži piktogram na kojem je navedena pravilna upotreba proizvoda.



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU

Zidna stanica sa 500 ml Plum sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć. Vrlo prikladno na manjim i mobilnim radnim stanicama.

Vreme ispiranja: otp. 5 minuta
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4611
Dimenzije: 300 x 170 x 80 mm



PLUM STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU MAXI

Zidna stanica sa 2 x 1000 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Vrlo prikladno za manje ili mobilne radne stanice gde i duže ispiranje očiju može biti potrebno. Sa štitnikom od prašine.

Vreme ispiranja: otp. 20 minuta
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4708
Dimenzije: 375 x 260 x 95 mm



PLUM SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU

Zidna stanica sa 2 x 500 ml Plum sredstvom za ispiranje očiju. Vrlo prikladno u čistom radnom okruženju gde nema prašine ali postoji opasnost mehaničkih povreda očiju.

Vreme ispiranja: otp. 10 minuta
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4694
Dimenzije: 290 x 228 x 80 mm



Iznenadno pukne cev puna tekućine pod pritiskom ili crevo upravo postane labavo... I zbog toga se oslobode materijali sa nagrizajućim dejstvom. Najčešće se nezgode uzrokovane hemikalijama na taj način događaju. Ukoliko hemikalija dođe u kontakt sa okom svaka sekunda se računa, ukoliko ne želite izgubiti vid!

Stanice za ispiranje očiju za slučajeve očnih povreda uzrokovanih hemikalijama

Zahvaljujući combibox-u možete se pripremiti na manje i ozbiljnije nezgode uzrokovane hemikalijama.

ZAJEDNIČKA SNAGA SREDSTVA ZA PRVU POMOĆ PLUM I SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU PH NEUTRAL

Ukoliko kiseli ili alkalni materijali dođu u dodir sa očima, preporučujemo kombinovano ispiranje – prvo sa pH Neutral-om, te sa Plum sredstvom za prvu pomoć i ispiranje očiju. Zbog toga smo sastavili izbor combi box-a, a zahvaljujući tome se odmah može početi neutralisanje hemikalije koja je došla do oka, te se sa fiziološkim rastvorom soli može nastaviti ispiranje sve dok ne stignemo kod lekara.

Ukoliko sa uglavnom tečnim hemikalijama radite, preporučujemo vam pH Neutral DUO, jer se na taj način i istovremeno ispiranje oba dva oka može omogućiti.

Otvorene stanice sredstva za ispiranje očiju preporučujemo za čista radna mesta bez prašine – na primer za laboratorije. Zatvorene stanice su izrađene za priljava radna mesta gde ima prašine. Svaka stanica se posebno može pričvrstiti, te sadrži ogledalo i piktogram. Na piktogramu se jasno vidi pravilna upotreba proizvoda.



PH NEUTRAL SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU U KUTIJI

200 ml pH neutral sredstva za ispiranje očiju u kutiji. Kutija od kartona štiti bočicu od prljavština ali se lako može otvoriti kada je potrebno. Brzo neutrališe hemikalije od kiseline i lužine. Prikladno za dopunu stanica ali praktično i za mobilne radne stanice, vozila.

Vreme ispiranja:	otp. 2 minute
Transp.pakovanje:	10
Broj artikla:	4755
Broj artikla zidne ručke:	955904
Dimenzije:	58 x 58 x 163 mm



QUICKCLEAN ZA ČIŠĆENJE RANA SA ZIDNOM RUČKOM

Kutija sadrži 40 komada maramica za Kutija sadrži 40 komada maramica za čišćenje rana, sa kojima možemo dezinficirati manje posekotine i povrede. Sadrži i zidnu ručku, tako da se lako može smestiti i u blizini obavljanja rada. Svaka maramica je zasebno pakovana, natopljena sterilnom vodom. Veličina maramica je 130 x 200 mm.

Transp.pakovanje:	6 x 40
Broj artikla:	5550
Dimenzije:	150 x 80 x 64 mm



STANICA ZA PRVU POMOĆ

Zidna stanica sa sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć, dozerom flastera, maramicom za čišćenje rana, ogledalom i piktogramom.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
1 x 500 ml Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	4604
1 x 40 QuickClean maramica za čišćenje rana	5551
1 x QuickFix dozer elastičnih flastera, sa 90 flastera	5507

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	5101
Dimenzije:	300 x 515 x 85 mm



PLUM COMBI-BOX DUO

Zidna stanica od polistirena, otporna na prašinu sa 500 ml pH Neutral DUO sredstva za ispiranje očiju i 500 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Posebno je prikladno u radnom okruženju gde ima puno prašine, u fabrikama gde se mogu dogoditi istovremene povrede oba dva oka. Uz pomoć Combi Box DUO možete se pripremiti na mehaničke povrede isto kao i na one uzrokovane hemikalijama.

Vreme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilni rastvor soli otp. 2 minute
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4862
Dimenzije: 280 x 230 x 110 mm



PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Zidna stanica od polistirena, otporna na prašinu sa 500 ml pH Neutral DUO sredstva za ispiranje očiju i 1000 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Posebno je prikladno u radnom okruženju gde ima puno prašine, u tvornicama gde se istovremeno mogu dogoditi povrede oba dva oka. Uz pomoć Combi Box DUO možete se pripremiti na mehaničke povrede isto kao i na one uzrokovane hemikalijama.

Vreme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilni rastvor soli otp. 5 minuta
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4810
Dimenzije: 357 x 252 x 116 mm



PLUM COMBI-BOKSZ

Zidna stanica od polistirena, otporna na prašinu sa 200 ml pH Neutral sredstva za ispiranje očiju i 500 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Posebno je prikladno u radnom okruženju gde ima puno prašine, u fabrikama gde se istovremeno mogu dogoditi povrede oba dva oka.

Vreme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilni rastvor soli otp. 5 minuta
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4787
Dimenzije: 280 x 230 x 110 mm
MOGUĆE UGRAĐIVANJE I ZAJEDNO SA JEDINICOM ZA GREJANJE
Broj artikla: 4664



PH NEUTRAL STANICA ZA ISPIRANJE OČIJU MLAZOM

Zidna stanica sa 1000 ml pH Neutral sredstva za ispiranje očiju, koje brzo neutrališe kiseline i lužine. Lako se može pričvrstiti na zid na radnom mestu. Sa štitnikom od prašine.

Vreme ispiranja: otp. 2 minute
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4741
Dimenzije: 300 x 160 x 95 mm



PLUM COMBI-STATION

Zidna stanica sa 200 ml pH Neutral i 500 ml Plum sredstvom za ispiranje očiju i prvu pomoć. Izvanredno je dobar izbor za radna mesta gde se mehaničke povrede očiju mogu dogoditi isto kao i one uzrokovane hemikalijama.

Vreme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilni rastvor soli otp. 5 minuta
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4773
Dimenzije: 290 x 228 x 80 mm



PLUM COMBI-STATION DUO

Zidna stanica sa 500 ml pH Neutral DUO i 1000 ml Plum DUO sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć. Posebno je prikladno u radnom okruženju gde postoji opasnost nezgoda uzrokovanih mehaničkim putem ili hemikalijama, te se istovremeno mogu dogoditi povrede oba dva oka.

Vreme ispiranja: pH Neutral otp. 2 minute
Sterilni rastvor soli otp. 5 minuta
Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 4803
Dimenzije: 375 x 250 x 95 mm

Quick

FIX

JEDINSTVENI QUICKFIX SISTEM DOZIRANJA

- Osigurava brz i vidljiv pristup flasterima i ampulama za ispiranje očiju.
- Flaster izvađen iz dozera je odmah spreman za korištenje.
- Svaki flaster je zasebno pakovan.
- Lako ga je koristiti i sam sa jednom rukom.
- Dozer se bilo kada može ponovo napuniti.
- Odmah se može primetiti ako je dozer prazan.
- Lako se mogu zaustaviti manja krvarenja bez uprljanja ostalih flastera.
- Lako možemo naći mesto za dozer manje veličine bilo gde.
- Dozer sa policom: možemo na njoj držati i druga važna sredstva.
- Dozer se čak i ključem može zaključati.



QUICKFIX - ELASTIČAN

Zidni dozer sa 90 komada elastičnih flastera. Flasteri su napravljeni od specijalnog materijala koji odgovara koži – omogućuje njeno disanje.

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	5502
Broj artikla za dopunu:	5512
Dimenzije dozera:	135 x 230 x 32 mm
Dimenzije flastera:	72 x 25 mm



QUICKFIX - VODOOTPORAN

Zidni dozer sa 90 komada voodootpornih flastera, izrađena specijalno za vlažna poslovna okruženja. Flasteri su napravljeni od specijalnog materijala koji odgovara koži- omogućujući njeno disanje.

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	5501
Broj artikla za dopunu:	5511
Dimenzije dozera:	135 x 230 x 32 mm
Dimenzije flastera:	72 x 25 mm



QUICKFIX - MEŠANO

Zidni dozeri sa 45 komada elastičnih i 45 komada voodootpornih flastera. Dve vrste flastera se prilagođavaju promenama poslovnih okruženja.

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	5507
Broj artikla za dopunu:	5512 & 5511
Dimenzije dozera:	135 x 230 x 32 mm
Dimenzije flastera:	72 x 25 mm

QuickFix je brza pomoć u slučaju manjih, svakodnevnih povreda

Sa zidnim dozerom puno vremena možete poštediti. Samo nalepite flaster i već možete nastaviti s radom!

BRZA I HIGIJENSKA POMOĆ U SLUČAJU MANJIH POVREDA

Manje nezgode se svaki dan mogu dogoditi i na radnom mestu. Kod sitnih povreda dovoljan je i jedan flaster. Izaberite flaster koji odgovara vašem radnom mestu – ili njegovu odgovarajuću kombinaciju! Nudimo rešenja za radnike osnovna ili vlažna poslovna okruženja, ali čak i za prehrambenu industriju. Ne gubite vreme: izvadite flaster iz dozera, nalepite ga i već možete nastaviti sa radom! QuickFix brzo, higijenski i efikasno rešava problem.



Izvadite flaster iz dozera. On je odmah spreman za korištenje...



...i lako se može nalepiti i jednom rukom.

MOŽETE BIRATI IZMEĐU 3 VRSTE I 2 VELIČINE

ELASTIČNI FLASTERI

Flasteri od materijala koji odgovara koži. Odgovaraju površini kože i kretanju ruke.

VODOOTPORNI FLASTERI

Vodootporni flasteri za radnike vlažnih radnih okruženja.

FLASTERI SA METALNIM VLAKNIMA

Flasteri sa metalnim vlaknima izrađeni specijalno za prehrambenu industriju. Zahvaljujući živoj boji i ugrađenim metalnim vlaknima lako se može identifikovati pogledom i detektorom metala.

QUICKFIX LONG

Ekstra dugački flasteri. Više puta se mogu omotati oko prstiju, na taj način osiguravajući da će flaster ostati na mestu i tokom rada.



QUICKFIX – SA UGRAĐENIM METALNIM VLAKNIMA

Zidni dozer sa 90 komada flastera sa metalnim vlaknima koji se detektorom mogu identifikovati. Izrađeni su specijalno za prehrambenu industriju. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži – na taj način osiguravajući disanje kože.



QUICKFIX LONG - ELASTIČAN

Zidni dozer sa 60 komada dugačkih, elastičnih flastera, koji odgovaraju površini kože. Više se puta mogu omotati oko prstiju, osiguravajući da ostanu na mestu i tokom rada. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži – omogućujući disanje kože.



QUICKFIX LONG – SA METALNIM VLAKNIMA

Zidni dozer sa 60 komada plavih flastera sa metalnim vlaknima, koji se detektorom mogu identifikovati. Izrađeni su specijalno za prehrambenu industriju. Više puta se mogu omotati oko prstiju, osiguravajući da ostanu na mestu i tokom rada. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži.

Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 5503
Broj artikla za dopunu: 5513
Dimenzije dozera: 135 x 230 x 32 mm
Dimenzije flastera: 72 x 25 mm

Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 5528
Broj artikla za dopunu: 5508
Dimenzije dozera: 135 x 230 x 32 mm
Dimenzije flastera: 120 x 20 mm

Transp.pakovanje: 1
Broj artikla: 5529
Broj artikla za dopunu: 5509
Dimenzije dozera: 135 x 230 x 32 mm
Dimenzije flastera: 120 x 20 mm



QUICKFIX & RINSE

Sistem za doziranje sa 5 komada ampula za ispiranje očiju, koji se može pričvrstiti na zid, ampule sadrže sterilni rastvor soli od 0.9%; te sa 45 komada elastičnih flastera. Sistem doziranja pruža jednostavnu, brzu i higijensku pomoć u slučaju manjih nezgoda (iritacija oka, sitne rane, posekotine).

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	4631
Broj artikla za dopunu:	5512 & 5160
Dimenzije dozera:	190 x 230 x 32 mm
Dimenzije flastera:	72 x 25 mm



Ampule manje veličine za sitne povrede

QuickRinse je ekonomično rešenje u slučaju manjih povreda očiju.



QUICKRINSE

Sistem dozera sa 10 komada ampula za ispiranje očiju koji se može pričvrstiti na zid, ampule sadrže sterilni rastvor soli od 0.9%; te sa 45 komada elastičnih flastera. Sistem doziranja pruža jednostavnu, brzu i higijensku pomoć u slučaju manjih povreda očiju, uzrokovane na primer prašinom, prljavštinom ili kao što je suvi osećaj oka tokom rada.

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	4632
Broj artikla za dopunu:	5160
Dimenzije dozera:	135 x 230 x 32 mm

QUICKRINSE – ZA BRZA ISPIRANJA!

Oko nam je jedno od najosetljivijih organa. Već početni suvi osećaj oka ili iritacija može biti prilično neugodna, pogotovo tokom rada. Može uzrokovati čak i bol ili osetljivost na svetlo, što sprečava rad. QuickRinse pomaže u vraćanju osećaja balansa.


Svaka ampula sadrži 20 ml rastvora za ispiranje očiju sa kojom se može ublažiti suvi osećaj oka ili iritacija uzrokovana manjim prljavštinama (na primer prašina). Kombinacija QuickFix & Rinse omogućuje da flasteri i ampule za ispiranje očiju uvek budu pri ruci.

Uvek pri ruci

Praktična rešenja

- ponesite prvu pomoć sa sobom!

Naši flasteri i ampule za ispiranje očiju su dostupne u praktičnom i nosivom izdanju. Držite ih uvek pri ruci: u kutiji za alate, u pretincu vozila, u torbi, u džepu kaputa ili u osnovnoj kutiji za prvu pomoć. Na taj način uvek možete biti pripremljeni na sitne, neočekivane povrede koje se dešavaju uvek kada ih najmanje očekujemo.

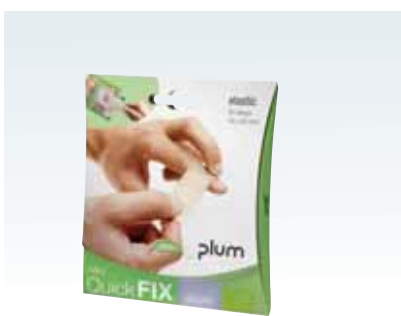

QUICKFIX MINI

Mali paket praktičnog izdanja sa 30 komada elastičnih flastera. Lako ga možete poneti bilo gde gde bi možda bio potreban flaster. Svaki flaster je zasebno pakovan i odmah spreman za uporabu. Flasteri su napravljeni od materijala koji je prikladan koži, odgovaraju njenoj površini i dopuštaju joj da slobodno diše.

Transp.pakovanje: 30 x 30
Broj artikla: 5504
Dimenzij flastera: 72 x 25 mm



QUICKRINSE MINI

Paket praktičnog izdanja sa 4 komada ampula za ispiranje očiju, od kojih svaka sadrži 20 ml sterilnog rastvora natrij-hlorida od 0.9%. Uz njihovu pomoć ublažuje se suvi osećaj u oku ili iritacija uzrokovana prašinom ili prljavštinom. Ampule se lako, sa jednim potezom mogu otvoriti i odmah koristiti. Zahvaljujući malom pakovanju QuickRinse Mini možete poneti bilo gde.

Transp.pakovanje: 5 x 4
Broj artikla: 4619



TORBICA OKO STRUKA ZA BOČICU OD 200 ML

Praktičan dodatak radnom odelu. Lako se otvara i omogućuje da prva pomoć uvek bude pri ruci. Bilo koje sredstvo za ispiranje očiju od 200 ml se sigurno i higijenski može držati u njoj.

Transp.pakovanje: 10
Broj artikla: 4692

QuickSafe – brza i jednostavna prva pomoć, odmah

Možete biti mirni: sve će uvek biti pri ruci kada je potrebno.

OSOBNO PRILAGOĐAVAJUĆE STANICE ZA PRVU POMOĆ

Napunite vlastitu stanicu za prvu pomoć proizvodima koji odgovaraju potrebama vašeg radnog mesta! Sredstvo za ispiranje očiju, za ispiranje prljavština. pH Neutral, za neutralisanje materijala od kiseline i lužine. Flaster, koji odgovara poslovnom okruženju. Gel za opekotine, koji pomaže u slučaju lakših, manje ozbiljnih opekotina. Sredstvo za ispiranje očiju za suve, iritirane oči. Maramice za čišćenje rana, za manje povrede. Kompresivni zavoj za hitno pružanje prve pomoći u slučaju ozbiljnijih nezgoda. Sve to iza providnog prozora, da odmah vidite gde se nalazi proizvod koji vam je trenutno potreban.

” **NAJVAŽNIJA SREDSTVA UVEK TREBAJU BITI PRED OČIMA.**

Spaencom A/S se bavi proizvodnjom betonskih elemenata. Kompanija je izabrala Plum QuickSafe da bi omogućila sigurno poslovno okruženje za 500 zaposlenih. “Izabrali smo Plum QuickSafe, da bi lako prilagodili stanice za prvu pomoć potrebama pojedinačnim područjima poslovanja. Na primer na područjima gde se betonski elementi peru kiselinama, na stanicama smestimo pH Neutral sredstva za ispiranje očiju i rastvor soli. QuickSafe uvek sadrži najpotrebnije elemente i možemo ih smestiti i u direktnoj blizini obavljanja posla. Tako da u slučaju nezgode pomoć odmah bude pri ruci.” Jany Johannsen, Environment and Safety Coordinator





QuickSafe® EMPTY

IZBOR JE VAŠ!

Ukoliko želite izabrati sadržaj stanice za prvu pomoć prema vlastitim potrebama sa potpunom slobodom, moguće je!



IZABERITE QUICKSAFE EMPTY, TE GA NAPUNITE ODGOVARAJUĆIM PROIZVODIMA!

Ukoliko od naše četiri QuickSafe stanice ni jedna ne odgovara potrebama vašem radnom mestu, stanica za prvu pomoć se može čak i 100% prilagoditi njima. To ćemo na sledećim stranicama detaljno navesti. Jednostavno izaberite praznu stanicu koja se može pričvrstiti na zid te potražite naše proizvode za prvu pomoć koji odgovaraju vašim potrebama.

Transp.pakovanje: 1
 Broj artikla: 5173
 Dimenzije: 430 x 253 x 92 mm

Pomoć je pri ruci

Laka dostupnost povećava sigurnost.

Uz pomoć QuickSafe-a možete postaviti najvažnije proizvode za prvu pomoć na isto mesto, te ih lako možete postaviti blizu mesta gde se obavlja rad- tamo gde će oni najviše biti potrebni. Sama stanica ne zauzima puno veće mesto na zidu od papira veličine A3, tako da svuda stane.

Zahvaljujući prozirnoj prednjoj strani, sadržaj stanice se lako može pregledati. Videti ćete koji proizvod je kada potrebno napuniti, a plastika istovremeno i štiti proizvode od prašine i ostalih prljavština. Higijensko i elegantno rešenje.



UČITAJTE QR KOD ILI POSETITE
WWW.PLUM-QUICKSAFE.HU
 STRANICU ZA NAJMODERNIJA
 REŠENJA PRVE POMOĆI



QuickSafe® BASIC

SAVRŠEN POČETAK

QuickSafe Basic pruža potpunu slobodu: Vi možete izabrati kakvi proizvodi da se pojave na vašim policama.



IMATE SPECIJALNE POTREBE U VEZI STANICE ZA PRVU POMOĆ?

Osnova celog QuickSafe sustava je Plum sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć. QuickSafe Basic, pored sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć sadrži i pH Neutral, ampule za ispiranje očiju i flastera. O ostalom Vi odlučujete. Prvu policu stanice možete napuniti proizvodima koji odgovaraju potrebama vaše kompanije.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
2 x 500 ml sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampule	5160
1 x QuickFix elastičnog flastera za dopunu, 45 komada flastera	5512

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	5170
Dimenzije:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® COMPLETE

POTPUNO REŠENJE

Sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć sa pH Neutral i ampulama za ispiranje očiju; kompresijski zavoj; maramice za čišćenje rana; flasteri i gel za opekotine u slučaju lakših opekotina.



VELIKI IZBOR PROIZVODA

QuickSafe Complete osigurava široki krug rešenja za prvu pomoć. Možete naći rešenje od najkritičnijih stanja do sasvim sitnih, svakodnevnih povreda.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
18 x QuickCool gel za opekotine	5150
1 x QuickStop kompresijski zavoj 1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	5152
20 x QuickClean maramice za čišćenje rana	5151
2 x 500 ml sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampule	5160
1 x QuickFix elastični flaster za dopunu sa 45 komada flastera	5512

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	5174
Dimenzije:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® FOOD INDUSTRY

REŠENJA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Ovu stanicu smo napunili proizvodima koji su osnovni u prehrambenoj industriji.



BRZO I SIGURNO REŠENJE, UGRAĐENA METALNA VLAKNA

Naša stanica za prvu pomoć, sastavljena za prehrambenu industriju, kantine i restorane među ostalom sadrži i flastere sa metalnim vlaknima, maramice za čišćenje rana, gel za opekotine i kompresijski zavoj.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
18 x QuickCool gel za opekotine	5150
1 x QuickStop sterilni zavoj	5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	
20 x QuickClean maramice za čišćenje rana	5151
2 x 500 ml sredstvo za ispiranje očiju i prvu pomoć	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x QuickFix flaster sa metalnim vlaknima 45 kom	5513
1 x QuickFix sa metalnim vlaknima, dugački flaster, 30 kom	5509

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	5175
Dimenzije:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

ZAŠTITA OD POVREDA

UZROKOVANIM HEMIKAJIJAMA

Povrede uzrokovane kiselinom i lužinom mogu imati ozbiljne, čak i na život opasne posledice, ukoliko se ne pobrinemo na vreme za odgovarajuću prvu pomoć.



KADA JE SPAS PITANJE SEKUNDI

Ukoliko se na vašem radnom mestu mogu dogoditi povrede uzrokovane hemikalijama, dostupnost učinkovitom sredstvu za ispiranje očiju je ključna činjenica. Stanica za prvu pomoć, izrađena za hemijsku industriju među ostalom sadrži i pH Neutral DUO sredstvo za ispiranje očiju, sa kojim se istovremeno može obaviti ispiranje oba dva oka.

SADRŽAJ:	Broj artikla:
1 x 500 ml sredstva za ispiranje očiju DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampule	5160
1 x QuickFix elastični flaster, 45 kom	5512

Transp.pakovanje:	1
Broj artikla:	5171
Dimenzije:	430 x 253 x 92 mm



QUICKSTOP

Kompresivni zavoj za efikasno pružanje prve pomoći, u slučaju manjih povreda ili jača krvarenja. Sterilni kompresivni zavoj je elastičan, napravljen od materijala koji odgovara koži, ali ne lepi se na nju i pušta je da diše.

SADRŽAJ:

1 x kompresivni zavoj,
17 x 17 cm

2 x kompresivni zavoj,
12 x 7,5 cm

Transp.pakovanje: 6 x 3
Broj artikla: 5152



QUICKCLEAN MARAMICA ZA ČIŠĆENJE RANA

40 komada maramica za čišćenje rana u kutiji, za manje rane, posekotine, opekotine. Svaka maramica je zasebno pakovana i natopljena sterilnom vodom. Prikladna za dopunu stanica za prvu pomoć i dozera za zidnom ručkom.

Transp.pakovanje: 13 x 20
Broj artikla: 5551



QUICKCLEAN

Maramice za čišćenje rana, u kutiji, za manje rane, posekotine, ogrebotine. Svaka maramica je zasebno pakovana i natopljena sterilnom vodom. Može se koristiti zasebno ili za dopunu QuickSafe stanica za prvu pomoć. Kutija sadrži 20 maramica.

Transp.pakovanje: 6 x 20
Broj artikla: 5151



QUICKCOOL

Gel za hitnu pomoć u slučaju lakših opekotina. Hladi i ublažava bol. Sadrži ulje od čajnog drveta. Može se koristiti posebno ili za dopune QuickSafe stanica za prvu pomoć. Kutija sadrži 18 komada.

Transp.pakovanje: 6 x 18
Broj artikla: 5150

Ne zaboravite na dopunjavanje

Sledećim proizvodima možete izvršiti dopunjavanje zalihe za prvu pomoć.

Bilo koju stanicu za prvu pomoć ili dozer flastera QuickFix lako možete napuniti sledećim našim proizvodima. Čak i nove proizvode možete dodati već postojećoj stanici za prvu pomoć. Svaka stanica se elastično može podesiti, a mi zbog toga možemo nuditi rešenja koja odgovaraju potrebama vaše kompanije.



QUICKFIX VODOOTPORAN – ZA DOPUNU

45 komada voodootpornih flastera koja su izrađena specijalno za vlažna radna mesta. Flasteri su napravljeni od specijalnog materijala koji odgovara koži- omogućujući joj da diše.

Transp.pakovanje: 6 x 45
Broj artikla: 5511
Dimenzije flastera: 72 x 25 mm



QUICKFIX ELASTIČAN – ZA DOPUNU

45 komada elastičnih flastera koji odgovaraju površini kože i kretanju ruke. Flasteri su napravljeni od specijalnog materijala koji odgovara koži- omogućujući njeno disanje.

Transp.pakovanje: 6 x 45
Broj artikla: 5512
Dimenzije flastera: 72 x 25 mm



QUICKFIX SA METALNIM VLAKNIMA – ZA DOPUNU

45 komada plavih flastera sa metalnim vlaknima, koji se detektorom mogu otkriti. Razvijeni su ciljano za prehrambenu industriju. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži- omogućujući disanje kože.

Transp.pakovanje: 6 x 45
Broj artikla: 5513
Dimenzije flastera: 72 x 25 mm



QUICKFIX LONG ELASTIČAN – ZA DOPUNU

30 komada dugačkih, elastičnih flastera koji odgovaraju površini kože. I više se puta mogu omotati oko prsta na taj način osiguravajući da flaster ostane na mestu i tokom rada. Flasteri su napravljeni od materijala koji je prikladan koži – omogućujući koži da diše.

Transp.pakovanje: 6 x 30
Broj artikla: 5508
Dimenzije flastera: 120 x 20 mm



QUICKFIX LONG SA METALNIM VLAKNIMA – ZA DOPUNU

30 komada dugačkih flastera sa metalnim vlaknima koja se detektorom mogu otkriti. Razvijeni su ciljano za prehrambenu industriju. I više puta se može omotati oko prsta, na taj način osigurava da će flaster ostati na mestu i tokom rada. Flasteri su napravljeni od materijala koji odgovara koži.

Transp.pakovanje: 6 x 30
Broj artikla: 5509
Dimenzije flastera: 120 x 20 mm



QUICKRINSE ZA DOPUNU

5 komada ampula za ispiranje očiju, koje sadrže 20 ml sterilnog rastvora natrij-hlorida od 0.9%. Prikladne su za dopunu QuickSafe, QuickFix & Rinse i QuickRinse stanica.

Transp.pakovanje: 4 x 5
Broj artikla: 5160

Plum Magyarország Kft. (d.o.o.)
8200 Veszprem,
Erdesz utca 4.

Tel./Faks: +36 88 326006
E-mail: info@plum.hu

plum